



T7 - medizinischer IT-Wagen

Der modulare IT-Visitenwagen für den täglichen Gebrauch im Krankenhaus

Der medizinische IT-Wagen T7 von *Humanscale* zeichnet sich durch modernste Technologie, Praktikabilität, Ergonomie und einfache Reinigung aus. Er überzeugt durch sein klares Design, die hochwertige Verarbeitung und inkludierte 5 Jahre Garantie (Akku: 3 Jahre Garantie).

Der T7 kann individuell konfiguriert werden: Mit PC, medizinischem PC oder Laptop, mit oder ohne integriertem Lithium-Akku (bis zu 12 h Laufzeit) und mit umfangreichem Zubehör. Die innovative, innenliegende Kabelführung sowie leicht zugängliche, glatte Flächen sorgen für denkbar einfache Reinigung und Desinfektion.

Die T7-Visitenwagenserie wurde nach ergonomischen Richtlinien entwickelt: Die Wagenhöhe passt sich an die Körpergröße an und fördert so die ergonomische Haltung – im Sitzen, wie auch im Stehen. Der T7 lässt sich auch einhändig bequem bedienen und lenken.

Individuell konfigurierbar

Die T7-Produktfamilie besteht aus folgenden Basismodellen, welche individuell konfiguriert werden können:



- **PC-Wagen mit/ohne Akku**
 - Flachbildschirme: max. 11 kg und 26"
 - PC mit den Maßen L 44 cm, B 31 cm, T 5,7 cm können in die Arbeitsplatte integriert werden
 - Größere PCs können mittels einer CPU-Halterung unter der Arbeitsplatte fixiert werden
- **Laptop-Wagen mit/ohne Akku**
 - Inkl. Diebstahlsicherung
 - Für Laptops mit bis zu 17" geeignet
- **T7-Wagen ohne Akku**

Höchste Flexibilität: Dank des modularen Systems kann der Laptop-Wagen später auf einen PC-Wagen umgerüstet werden und umgekehrt. Auch ein Upgrade auf den zukunftsweisenden MedLink®-Medikationswagen ist möglich.



Ergonomie

- Gerätemaße und Voreinstellungen sind optimiert auf beste ergonomische Haltung
- Intuitive, digitale Bedienungsoberfläche zum leichten Anpassen der Wagenhöhe an den Bediener
- Ergonomische, nach unten geneigte Tastaturablage inkl. Beleuchtung des Tastaturfeldes
- Der Monitorarm ermöglicht 15°-Neigung und 90°-Rotation. Der Monitor kann vom Benutzer in die gewünschte Position gebracht und zur Seite gedreht werden
- Dank revolutionärer **AutoFit-Technologie**, passt sich der T7-Visitenwagen automatisch an die Körpergröße des Benutzers an und fördert so die ergonomische Haltung – im Sitzen, wie im Stehen.

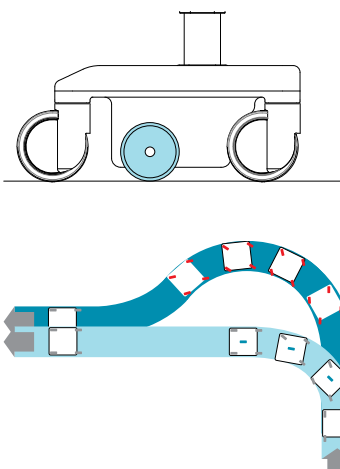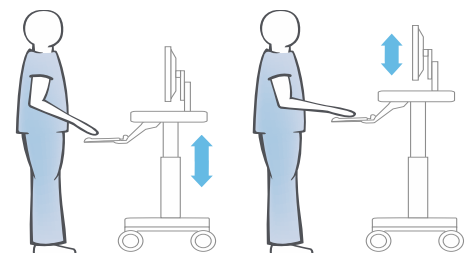

Mobilität

Die patentierte **PowerTrack®-Funktion** beinhaltet ein zusätzliches 5. Rad und ermöglicht eine besonders leichte Lenkung sowie außergewöhnliche Mobilität auch in engen Räumen, Korridoren und 90° Kurven. **PowerTrack®** lässt sich über einen Knopf an der Unterseite des Wagengriffes aktivieren.

Ein gut greifbarer, angenehmer Haltegriff macht das Schieben des Wagens einfach. Für eine freie Sicht auf den Gehweg kann der Bildschirm zur Seite gedreht werden.

Hygiene

Die Reinigung und Desinfektion wird durch das innovative Kabelmanagement denkbar einfach. Für maximale Hygiene werden die Kabel innen geführt. In allen Kunststoffteilen des T7 sind zudem antibakterielle **AlphaSan®**-Zusatzstoffe eingearbeitet, welche für höchste Infektionskontrolle sorgen. Das klare Design mit glatten Oberflächen ermöglicht eine mühelose Wischdesinfektion des Wagens.



Zubehör

Ein umfangreicher Zubehörcatalog ermöglicht individuelle Konfiguration des Wagens.



Der MedLink®-Medikationswagen

25 – 30 % der Medikationsfehler passieren in der Administration. Die smarte Point-of-Care Lösung MedLink® ermöglicht ein geschlossenes Medikationssystem zur Vermeidung dieser Fehler. Der Prozess der Medikamentenverteilung wird mit dem MedLink®-Medikationswagen optimiert und die Patientensicherheit erhöht.

Die Laden des Wagens werden direkt in der Apotheke oder auf der Station befüllt, und über die MedLink®-Software einem bestimmten Patienten zugeordnet. Vor Ort wird das Identifikations-Armband des Patienten gescannt und es öffnet sich automatisch die richtige Schublade.

