


Havel

HEALTHCARE

Alles rund
um das
Bett

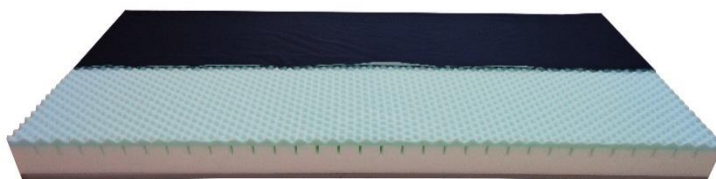

Matratzen
Kindermatratzen
Antidekubitus-Matratzen
Wechseldrucksysteme
Kopfpolster und Bettdecken
Evakuierungsdecken
Pflegebett
Kinderbett
Bettsensor
Sturzmatten

Havel Healthcare GmbH

Santenweg 13, 7052 Müllendorf

Tel.: +43 2682 64903


Fax: +43 2682 64903-99

office@havel-healthcare.com | www.havel-healthcare.com

Aktiv – Matratze I

Die Aktiv – Matratze I ist speziell für mobile Patienten konzipiert, wobei hier der hochwertige, atmungsaktive Spezial-Duren-Komfortschaum mit dem Raumgewicht 40 zum Einsatz kommt.

Durch die V-Einschnitte ist die Matratze ausgezeichnet geeignet für Betten mit verstellbaren Schulter- und Fußteilen. Die körpergerechten Einschnitte passen sich dem Körper gleichermaßen an. Die Matratze kann beidseitig verwendet werden.

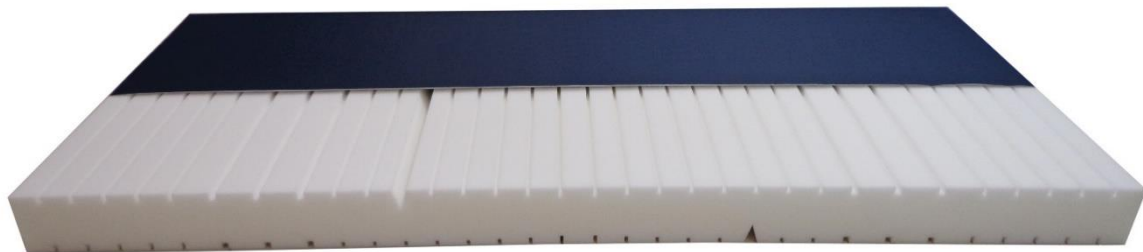

Maß: 200 x 90 x 12 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg


Optionen:

- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken
- Variante „Heavy“ für Patienten mit bis zu 200 kg

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C

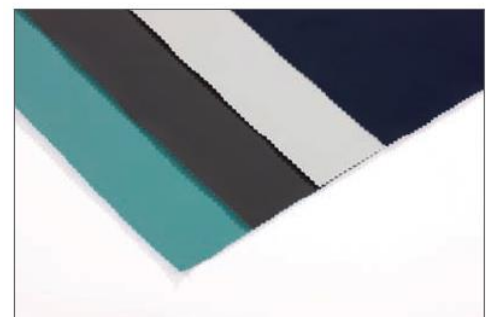


Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Art. Nr. 1101KM001

Agil – Matratze II

Die Agil – Matratze II besteht aus einem hochwertigem Kaltschaum (Raumgewicht 35). Durch die Würfelschnitttechnologie wird das Körpergewicht punktuell verteilt und passt sich ideal dem Körper an. Die Matratze kann beidseitig verwendet werden.

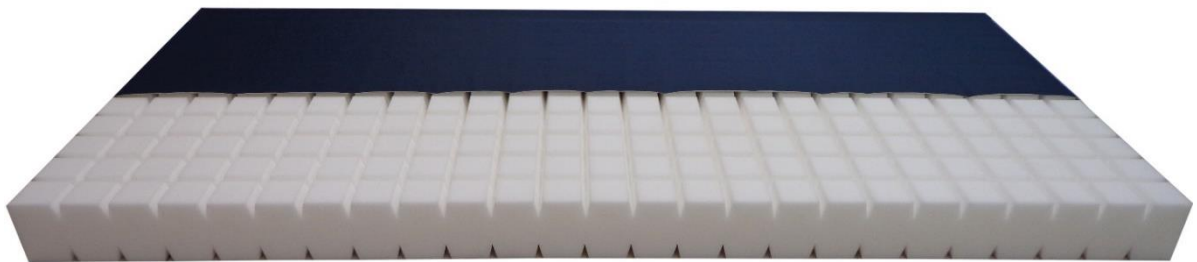

Maß: 200 x 90 x 13 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg


Optionen:

- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C

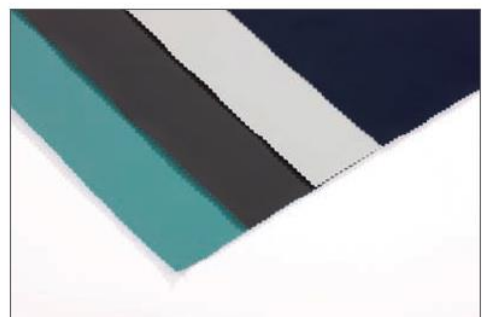

Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Art. Nr. 1101KM21


Charmant – Matratze III

Die Charmant-Matratze ist eine hochwertige Krankenhausmatratze. Sie hat eine harte und eine weiche Seite. Je nach den Bedürfnissen des Patienten kann die entsprechende Seite gewählt werden.

Die weiche Seite wirkt durch die noppenförmige thermosensible Viskoauflage und den Würfelschnitt druckentlastend und ist besonders für dekubitusgefährdete sowie leichte Personen geeignet. Die harte Seite besteht aus einem speziellen Stützschaum sowie Klimakanäle für die optimale Belüftung - besonders geeignet für schwerere Personen.

Matratzenkern:

- Oberseite 2cm Viskoschaum mit Noppen
- Mittelteil 10 cm Spezialschaum mit 3D-Schnitt
- Unterseite 2cm stabilisierender Stützschaum

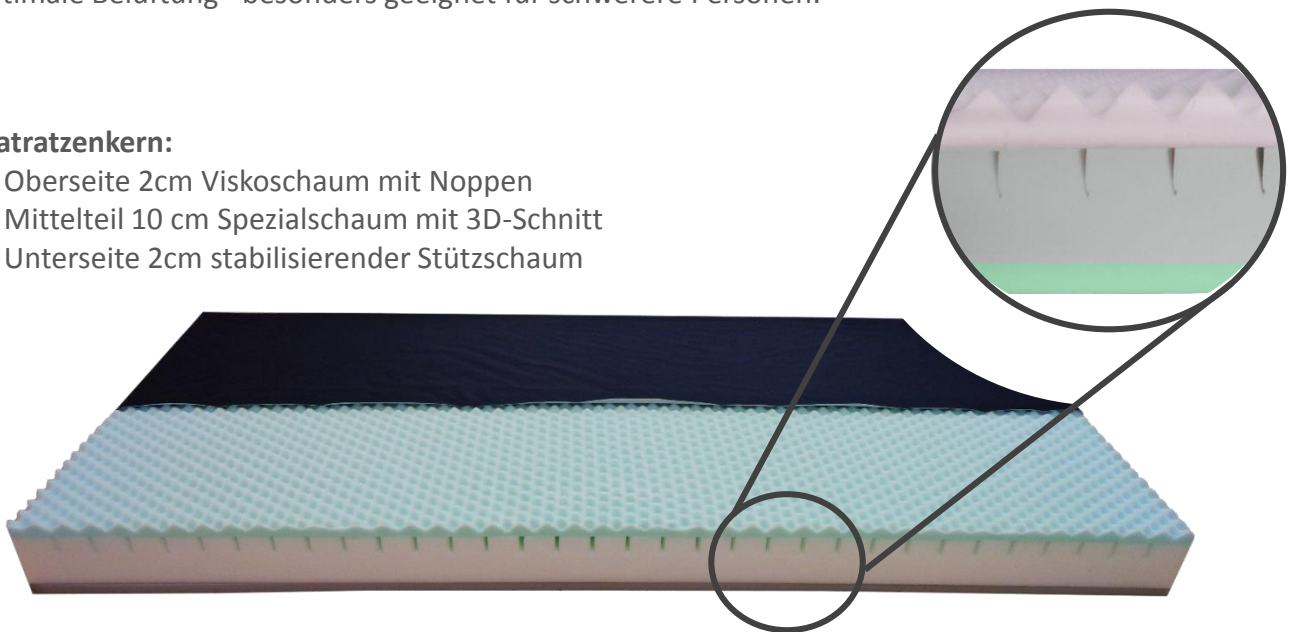

Maß: 200 x 90 x 14 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg

Optionen:


- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken
- Zweifarbiger Bezug (zur leichteren Identifikation der harten und weichen Seite)

Art. Nr. 1101KM061

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C

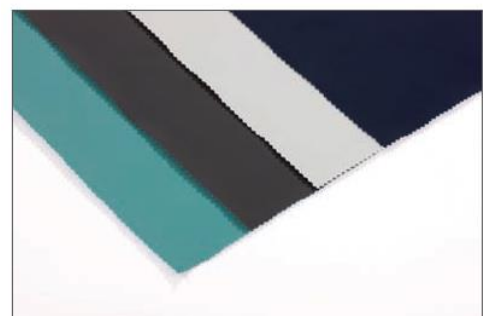

Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün


Sensibel - Matratze IV

Die viskoelastische, thermosensible Oberseite sorgt für perfekte Druckentlastung und konturengenaue Körperanpassung. Zusätzlich sorgen Klimakanäle für ideales Schlafklima und Reduktion der Oberflächenspannung.

Die Matratze ist für die Prävention von Dekubitus geeignet.

Matratzenkern:

- Oberseite 4 cm Viskoschaum
- Unterseite 10 cm Kaltschaum
- Klimakanäle

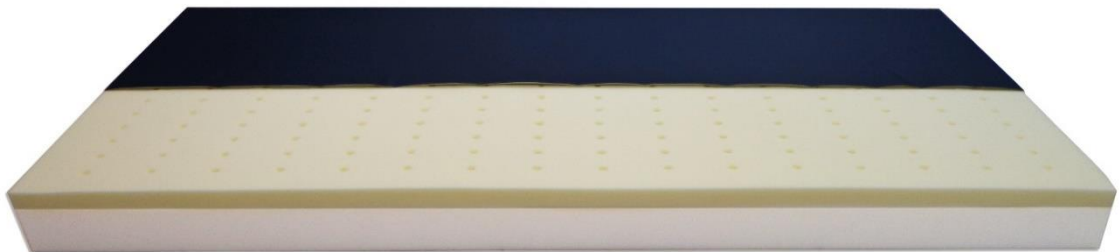

Maß: 200 x 90 x 14 cm (LxBxH) – weitere Maße auf Anfrage
Max. Benutzergewicht: 120 kg

Optionen:


- Seitenrandverstärkung
- Abgeschnittene Ecken
- Zweifarbiger Bezug (zur leichteren Identifikation der viskoelastischen Seite)

Art. Nr. 1101KM041

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C

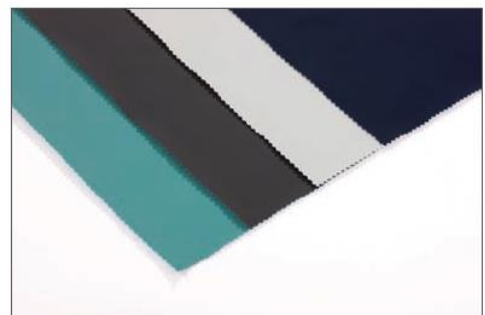

Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Kindermatratzen für Kindergitterbetten

Regenbogen

Die Matratze Regenbogen besteht aus einem punktelastischem Kaltschaum, welche zur Belüftung vertikale Luftkanäle hat.

Größe: 70 x 140 x 10 cm
(weitere Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101T014309

Polarstern

Die Kindermatratze Polarstern ist aus einem hochwertiger Kaltschaum hergestellt. Sie ist sowohl für Babys (lila Seite) wie auch für Kleinkinder (rosa Schaum) geeignet.

Eine ideale Belüftung wird durch das einzigartige, patentierte More-way® Belüftungssystem sicher gestellt.




Die Sicherheitstrittkanten sorgt dafür, dass ein Herausrollen aus dem Bett erschwert wird und dass ein sicheres Stehen an der Bettkante möglich ist.

Größe: 70 x 140 x 11 cm (weiter Maße auf Anfrage)

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Medizin-Bezug ist waschbar bei 95°C sowie tumblerfest.

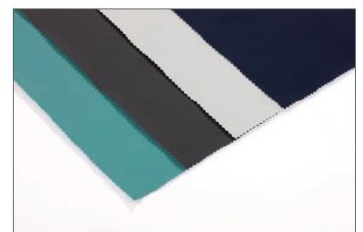

Kindermatratzen für Säuglingswägen

Stern

Die Stern Matratze wird aus hochwertigem Kaltschaum hergestellt und hat einen glatten Schnitt.

Größe: 35 x 65 x 5 cm (weiter Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101KMSM001

Mond

Die Mond Matratze wird aus hochwertigem Kaltschaum hergestellt und hat einen Würfelschnitt an der Oberseite. Durch diesen Schnitt wird der Druck im sensiblen Kopfbereich entlastet und trägt zu einem guten Schlaf des Säuglings bei.

Größe: 35 x 65 x 5 cm (weiter Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101KMSM011

Wolke

Die Wolke Matratze besteht aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen. Die Oberseite (1,5 cm) ist ein druckentlastender Viscoschaum mit einer Wabenkontur. Die Unterseite ist eine stabilisierende Basis mit einem 3 cm hohen Kaltschaum. Diese Matratze bietet eine ausgezeichnete Druckentlastung für die Säuglinge.

Größe: 35 x 65 x 5 cm (weiter Maße auf Anfrage)



Art. Nr. 1101KMSM021

PU-Bezug

Alle Säuglingsmatratzen werden standardmäßig mit einem PU-Bezug geliefert. (Zipp auf 2 Seiten)

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Medizin-Bezug ist waschbar bei 95°C sowie tumblerfest.



ASX

Wechseldrucksystem zur Behandlung von Dekubitus bis Stadium III nach EPUAP.

Das AS X System wird mit Steuergerät ausgeliefert. Es verfügt über ein sehr robustes Gehäuse mit stabilen 7 cm Haltebügeln. Sicherungen und Filter sind außenliegend. Wechseldruckbetrieb und Statikfunktion ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.

Die AS X Matratzenauflage verfügt über Nylon/PU-Zellen, davon 8 mit Mikroperforation. Der Bezug ist bi-elastisch, PU-beschichtet und mit einem umlaufenden Reißverschluss versehen. Die Auflage besteht aus einem doppelten Unterboden, so dass eine Schaumstoff-Matratzenbasis von bis zu 5 cm eingeschoben werden kann. Hierdurch wird die in dieser Kategorie übliche Untermatratze vor Verschmutzungen geschützt.

- Wechseldruck- und Statikbetrieb
- 18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch
- Wechseldruckrythmus 10 Minuten
- Hochwertiges, langlebiges Zellmaterial
- Längere Haltbarkeit durch Pumpe aus Vollmetall
- Geringes Geräuschniveau
- Akustischer und optischer Unterdruckalarm
- Auflage auch in 2,20 m Länge lieferbar
- Einstellbereich 0-140 kg
- Bruchsicheres Gehäuse
- 24 Monate Garantie



Technische Daten

Steuergerät

Maße: ca. 300 x 190 x 120 mm

Gewicht: ca. 3 kg

1 Membrankompressor, mech. Steuerung, Wechseldruckrythmus (10 Min.) und Statikbetrieb, Unterdruckalarm (optisch u. akustisch)

Matratzenauflage

Maße aufgepumpt: ca. 200 x 80/90 x 14 cm

Gewicht: ca. 5,6 kg

18 Zellen, 3 Kopfzellen statisch, knickfreie Anschlussschläuche (inkl. Transportsicherung), CPR-Notfallentlüftung

Materialien

Zellen: hochwertiges Nylon PU Zellmaterial

Bezug: PES-Polyurethanbezug mit umlaufendem Reißverschluss, bi-elastisch, hoch atmungsaktiv, rutschhemmend

Zubehör:

Optional: Schaumstoff-Matratzenbasis mit Nylonbezug

Max. Patientengewicht: 140 kg

Dekubitusgrad: I-III

Art. Nr.2106997008

Basic 95°



Komfortable Materialien sorgen bei diesem Programm für angenehmen Schlaf und ein wohliges Gefühl.

Steppkissen Basic 95°C

Bezug: MG 50, 50 % Baumwolle – 50 % Polyester

Füllung: 100 % Polystiks

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104420806-8080	80x80	700g	Karo 15	10
2104420806-6080	60x80	540g	Karo 15	10
2104420806-5070	50x70	380g	Karo 15	12
2104420806-4080	40x80	350g	Karo 15	15
2104420806-4060	40x60	240g	Karo 15	20
2104420806-4040	40x40	160g	Karo 15	30
2104420806-3540	35x40	140g	Karo 15	40

Einziehdecke Basic 95°C

Bezug: 50 % Baumwolle – 50 % Polyester, BW 70

Füllung: 100 % Polyester

Pflege: kochfest 95° , Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	VE
2104808810-135200	135x200	400 g/qm	12
2104808811-135200	135x200	480 g/qm	10

Objekt 95°



Kuschelige Decken und Kissen für den erholsamen Schlaf. Soft und leicht durch die bauschkräftige Polyester-Füllung.

Steppkissen Objekt 95°C

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser

Füllung: 100 % Polystiks

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104408536-8080	80x80	700g	Karo 15	10
2104408536-6080	60x80	540g	Karo 15	10
2104408536-5070	50x70	380g	Karo 15	12
2104408536-4080	40x80	350g	Karo 15	15
2104408536-4060	40x60	240g	Karo 15	20
2104408536-4040	40x40	160g	Karo 15	30
2104408536-3540	35x40	140g	Karo 15	40

Einziehdecke Objekt 95°C

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser

Füllung: 100 % Polyester

Pflege: kochfest 95° , Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	VE
2104804510-135200	135x200	400 g/qm	12



Sensitiv 95°



Hautsympathische Bettwaren für den gehobenen Anspruch. Der hochwertige Baumwollbezug sorgt für optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.

Steppkissen Sensitiv 95°C

Bezug: 100 % Baumwolle sanfor

Füllung: 100% Polyester-Faserbällchen Fiberfill 95°C

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104422606-8080	80x80	900g	Kl. Wabe	10
2104422606-6080	60x80	700g	Kl. Wabe	10
2104422606-5070	50x70	650g	Kl. Wabe	12
2104422606-4080	40x80	450g	Kl. Wabe	15
2104422606-4060	40x60	300g	Kl. Wabe	20
2104422606-4040	40x40	200g	Kl. Wabe	30
2104422606-3540	35x40	180g	Kl. Wabe	40

Einziehdecke Sensitive 95°C

Bezug: 100% Baumwolle sanfor

Füllung: 100 % Polyester Clean-Fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104802610-135200	135x200	400 g/qm	Karo 30	10
2104802611-135200	135x200	480 g/qm	Karo 30	8

Laundry



Das Laundry-Programm ist speziell für die Industriewäsche entwickelt worden. Es ist besonders strapazierfähig und hält häufigen Waschen stand.

Einziehdecke Laundry

Bezug: MG 730, 70% Baumwolle / 30% Polyester

Füllung: 100 % Polyester Clean-fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104808010-135200	135x200	400 g/qm	Karo 30	10
2104808011-135200	135x200	480 g/qm	Karo 30	8



Steppkissen Laundry

Bezug: MG 730, 70% Baumwolle / 30% Polyester + MF 50

Füllung: 100 % PUR-Würfel 1a Soft-Foam-Sticks

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104428896-8080	80x80	700g	Karo 15	10
2104428896-6080	60x80	540g	Karo 15	10
2104428896-5070	50x70	380g	Karo 15	12
2104428896-4080	40x80	350g	Karo 15	15
2104428896-4060	40x60	240g	Karo 15	20
2104428896-4040	40x40	160g	Karo 15	30
2104428896-3540	35x40	140g	Karo 15	40

Flammhemmend 95°

Obermaterial und Füllung gestatten höchste Ansprüche an Sicherheit und Haltbarkeit, ohne etwas von ihrer Anschmiegsamkeit und Atmungsaktivität einzubüßen.

Einziehdecke Flammhemmend Classic

Bezug: 100 % Polyester FH

Füllung: 100 % Polyester FH

Pflege: waschbar 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104892110-135200	135x200	400 g/qm	Wabe	10
2104892110-153200	155x200	400 g/qm	Wabe	6



Einziehdecke Trevira CS

Bezug: 100% Polyester Trevira CS, FH 100

Füllung: 100 % Polyester Trevira CS

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

100% permanent flammhemmend!

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104892710-135200	135x200	400 g/qm	Karo 30	10
2104892711-135200	135x200	480 g/qm	Karo 30	8

Steppkissen Flammhemmend

Bezug: 100 % Polyester FH

Füllung: 100% Polyesterstäbchen

Pflege: waschbar 95° / Tumbler 100°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104428806-8080	80x80	700 g/qm	Karo 15	10
2104428806-6080	60x80	540 g/qm	Karo 15	10
2104428806-4080	40x80	350 g/qm	Karo 15	15
2104428806-4040	40x40	160 g/qm	Karo 15	30

Einziehdecke Flammhemmend

Bezug: 100% Polyester Trevira CS, FH 100

Füllung: 100 % Polyester FH

Pflege: waschbar 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG	Steppung	VE
2104892010-135200	135x200	400 g/qm	Wabe	10
2104892011-135200	135x200	480 g/qm	Wabe	8



Kinderprogramm 95°



Von Anfang an gut und gesund schlafen. Die optimale Schlafumgebung beschert den Kindern ein wohliges Gefühl und den damit verbundenen erholsamen Schlaf.

Einziehdecke Standard 95°

Bezug: 50 % Baumwolle – 50 % Polyester,
MG 50

Füllung: 100 % Polyester boilproof

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
2104802522	100x135	400 g/qm
210412160924	100x150	400 g/qm

Einziehdecke Microfaser 95°

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser,
MF 100

Füllung: 100 % Hochbausch-Polyester

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
210412961222	100x135	400 g/qm
210412961224	100x150	400 g/qm

Einziehdecke Clean Nights

Bezug: Spezialgewebe 50% Baumwolle,
50% Polyester, MG 70

Füllung: 100 % Polyester Clean-fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
2104802113	100x135	480 g/qm
2104802151	100x150	480 g/qm



Einziehdecke Hygiene 95°

Bezug: 100 % Polyester-Microfaser
bedguard antibakteriell, MF 100 B

Füllung: 100 % Polyester Clean-fill

Pflege: kochfest 95° / Tumbler 120°

Art.Nr.	Größe	FG
2104801622	100x135	450 g/qm
2104801624	100x150	450 g/qm

Flachkissen Standard 95° C

Art.Nr.	Größe	FG
21044281005	40x60	400 g/qm
2104802520	40x40	400 g/qm

Flachkissen Microfaser 95° C

Art.Nr.	Größe	FG
210412961260	40x60	400 g/qm
210412961240	40x40	400 g/qm

Flachkissen CleanNights

Art.Nr.	Größe	FG
21044281001	40x60	480 g/qm
21044281004	40x40	480 g/qm

Flachkissen Hygiene 95° C

Art.Nr.	Größe	FG
2104801660	40x60	450 g/qm
2104801640	40x40	450 g/qm

Schonbezüge für Matratzen, Bettdecken und Pölster

Die blut-, urin- und virendichten Schonbezüge schützen Ihre Matratze und Bettwaren vor Flüssigkeiten und Keimen. Sie können einfach gewechselt werden und sind waschbar bei 95°C und trocknergeeignet. Eine Sterilisation ist bei 134° C (5 min) möglich.



Matratzenschonbezug

Der Überzug wird wie ein Spannlentuch auf die Matratze gespannt und kann einfach gewechselt werden.

Größe: 200x90x17 cm (andere Maße auf Anfrage)

Art. Nr. 1101SL90200W14-18

Polsterschonbezug

Der Überzug wird wie „Bettwäsche“ über den Polster gezogen und kann einfach gewechselt werden.

Größe: 60x80 cm (andere Maße auf Anfrage)


Varianten: Hotelverschluss oder Reißverschluss

Bettdeckenschonbezug

Der Überzug wird wie „Bettwäsche“ über die Bettdecke gezogen und kann einfach gewechselt werden.

Größe: 140x200 cm (andere Maße auf Anfrage)

Varianten: Hotelverschluss oder Reißverschluss

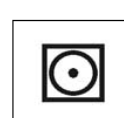

Evakuierungsdecke

Technische Hinweise

- Basisgewebe: 100% Polypropylen
- Gurte: 100% Polyester
- Eckspanngummi: Elasthan
- Die Eckspanngummis sind austauschbar!


IM ERNSTFALL

1. Bewohner informieren und sichern.




Art. Nr.2112003

ungsdecke in einem 90° Winkel aus dem Bett ziehen.

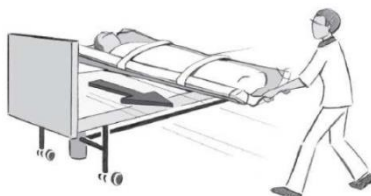

3. Ebenerdige Rettung

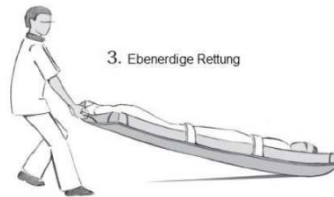

4. Treppen abwärts



Pflegehinweise

- Um das Ausleiern durch z.B. eine zu hohe Waschtemperatur zu vermeiden empfehlen wir, die Eckgummis vor dem Waschen abzunehmen und nachher wieder ganz einfach anzukletten.
- Gewebe ist geruchlos und atmungsaktiv
- Vor dem Waschen bitte die Klettverschlüsse übereinander legen
- Die Decke kann bei 60 Grad C gewaschen werden
- Keinen Weichspüler benutzen
- Nicht bügeln und mangeln
- Im Trockner bei unterster Temperatur trocknen
- Die Decke ist mit allen marktüblichen Desinfektionsmitteln kompatibel

Matratzenüberzug mit integrierter Evakuierungsdecke

Material:

Oberseite: PU Schutzbezug - nass desinfizierbar, atmungsaktiv, allergendicht, bakteriendicht

Unterseite: 100 % PES Webware mit Evakuierungsausstattung; Leinwandbindung; mit seitlich angebrachten Gurtbändern incl. Klettverschluß; fest aufgenähte Gurtbänder incl. Griffschlaufen auf der Unterseite


Evakuierungs-Bezug flammhemmend

Reinigung: 90°C waschbar, trocknergeeignet, nassdesinfizierbar

Evakuierungs-Bezug schwer entflammbar

Reinigung: 95°C waschbar, trocknergeeignet, nassdesinfizierbar

- Leichte Handhabung – im Ernstfall jederzeit einsetzbar
- Evakuierung mit nur einer Person möglich
- Stabile Transportschlaufen
- Stabile Patienten Sicherungsgurte mit Klettverschluss
- Gleitfähige Unterseite

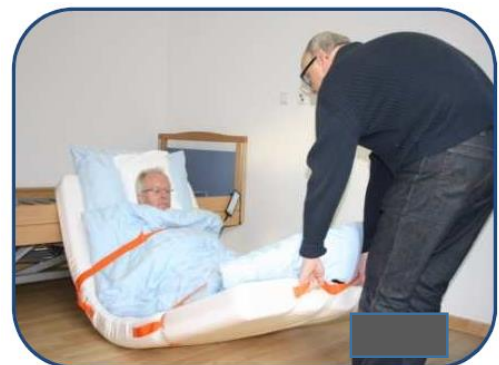

Art. Nr. 2112001

Luna

Mit der Handbedienung verstellen Sie problemlos die Höhe, das Kopfteil und den Knieknick (das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden). Alle 4 Räder sind einzeln bremsbar. Das Bett kann ohne Werkzeug in leicht transportierbare Teile zerlegt werden. Seitengitter aus Holz und Aufrichter (Bettgalgen beidseitig montierbar) sind im Preis inbegriffen.



Ästhetisch und pflegeleicht

Die in Holz ausgeführte Vorder- und Rückseite gibt diesem höhenverstellbaren Bett einen häuslichen Charakter. Die warme Ausstrahlung des Holzes verwandelt das Bett in ein Möbelstück, das in jede Umgebung passt. Zudem ist es einfach zu pflegen.

Optionen

- Aufsteckbare Erhöhung der Seitengitter aus Holz
- Wandabweiser
- 4-motorig mit elektr. Knieknick

Art. Nr.1104010

Breite	Länge	Position min.	Position max.	Neigung Kopfstütze	Neigung Fußstütze	Gewicht	Belastbarkeit
103	214	40	80	83°	30°	110 kg	140 kg

Gitterbett Maximo

Das Gitterbett vereint zukunftsorientierte Anforderungen mit kindgerechter Gestaltung: Pflegeorientierte Sicherheit – und mit Sicherheit auch farbenfroh. Das fröhliche Design lässt die Tage im Krankenhaus wie im Nu verfliegen und verleiht den Räumen eine freundliche Atmosphäre. Neben dem modernen Design gibt das Bett schon jetzt Antworten auf die voraussichtlichen Normvorgaben – so investieren Sie schon heute in die Zukunft.

Effizienz der Pflege

Die Pflege von Kindern hat spezielle Anforderungen. Mit durchdachten Konzepten wird der Pflegealltag erleichtert. Pflegeutensilien müssen immer gut und schnell erreichbar sein.

Praktisch. Sei es mit dem schwenkbaren Windeleimer oder dem ausziehbaren Wäschekorb – der Komfort in der Pflege wird gesteigert. Ein Handgriff und alles ist schnell nutzbar. (Zusatzausstattung)

Stufenlos eine Stufe höher.

Eine weitere Raffinesse der Seitensicherung ist die stufenlose und leise Verstellung der individuellen Höhe. Die störenden Rastgeräusche gehören der Vergangenheit an. Leise und einfach ausgelöst, mit Hilfe eines Fußpedals sind die Seitensicherungen komfortabel zu bedienen.




Sensormatten

Spezielle Sensormatten für infektiöse Patienten
Wegwerfbare Sensormatten – Haltbarkeit 90 Tage


- Auf Druck reagierende Sensormatte, 1mm dünn
- Lange Lebensdauer durch qualitativ hochwertige Sensoren
- Funk oder kabelgebundene Sensormatte
- Anbindung an das Schwesternnotrufsystem
- Wasserabweisend, desinfektionsmittelbeständig für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel

Bodensensor

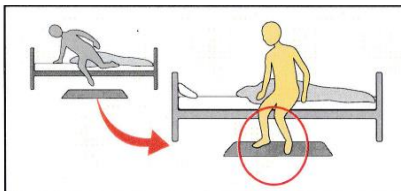


- Bei Berührung der Matte am Boden wird der Alarm ausgelöst
- Funk oder kabelgebunden
- Funkvariante auch Batterielos verfügbar - Keine Wartung

Bettsensor

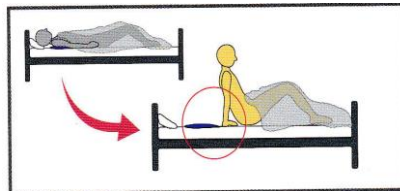

- Beim Aufrichten findet eine Druckentlastung auf der Sensormatte statt wodurch ein Alarm ausgelöst wird
- Erkennt das Aufsetzen im Bett
- Funk oder kabelgebunden
- Kann unter der Matratze verwendet werden


Bettrandsensor

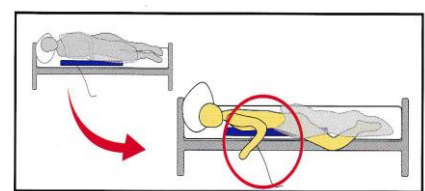

- Durch Druck auf den Sensorstreifen wird Alarm ausgelöst
- Funk oder kabelgebunden
- Kann unter der Matratze verwendet werden

Rollstuhlsensor

- Durch Druckentlastung wird Alarm ausgelöst
- Funk oder kabelgebunden

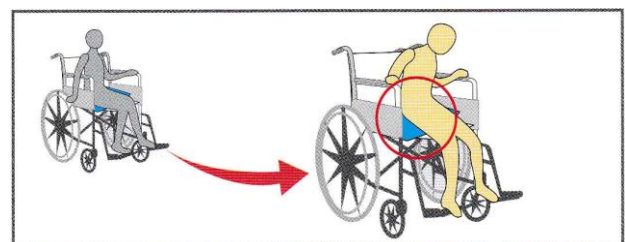

Sturzmatte I

Sturzmatten minimieren das Verletzungsrisiko beim Sturz aus dem Pflegebett maßgeblich, ohne den Patienten schon im Vorhinein in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das Modell Sturzmatte I ist die einfachste Art vorzubeugen. Dieses Modell ist durch die rutschfeste Unterseite individuell einsetzbar und kann auch bei der Boden- und Bewegungstherapie verwendet werden.

Sturzmatte I

- 5cm hochelastischer, formstabiler Spezialschaum
- universell einsetzbar
- rutschfeste Unterseite
- platzsparend, gerollt lagerbar
- Ökologisch hergestellt, FCKW-frei, entspricht Ökotex Standard 100
- Standardmaße: 90x200x5
- Variation in anderen Größen oder faltbar verfügbar




Art. Nr.1102HV010

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C

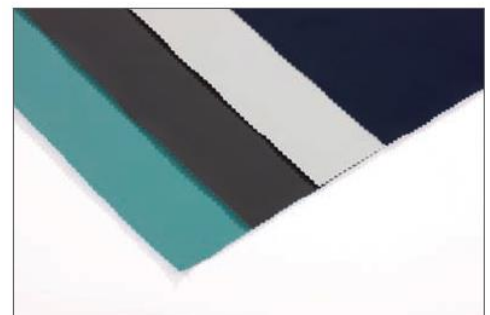


Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün

Sturzmatte II

Sturzmatten minimieren das Verletzungsrisiko beim Sturz aus dem Pflegebett maßgeblich, ohne den Patienten schon im Vorhinein in seiner Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das Modell Sturzmatte II verhindert durch den Keil das Stürzen aus dem Bett und ermöglicht ein sanftes Abrollen über den Keil auf die Liegefläche. Die rutschfeste Unterseite bietet Sicherheit. Tagsüber kann sie einfach zusammengeklappt und leicht verstaut werden.

Sturzmatte II

- Hochelastischer, formstabiler Spezialschaum 5cm-15cm
- Optimale Minimierung des Verletzungsrisikos durch Keilform
- Platz sparend zu lagern, einfach faltbar durch 2tlg. Ausführung
- Rutschfeste Unterseite
- Ökologisch hergestellt, FCKW-frei, entspricht Ökotex Standard 100
- Standardmaße: 100x190x5-15 cm
- Optional durch Reißverschluss beide Teile trennbar

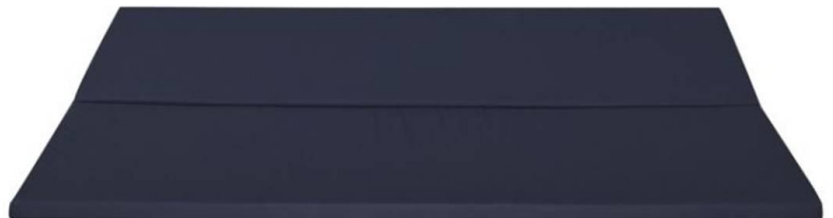


Art. Nr. 1102HV020

PU-Bezug

Der Bezug schützt den Matratzenkern vor Feuchtigkeit und ist blut- und urinundurchlässig. Der atmungsaktive Schutzbezug ist flammhemmend, wasserdampfdurchlässig und desinfizierbar. Der Bezug ist waschbar bei 95°C sowie Trockner geeignet.

- flammhemmend
- blut- und urinundurchlässig
- desinfizierbar
- waschbar bis 95°C

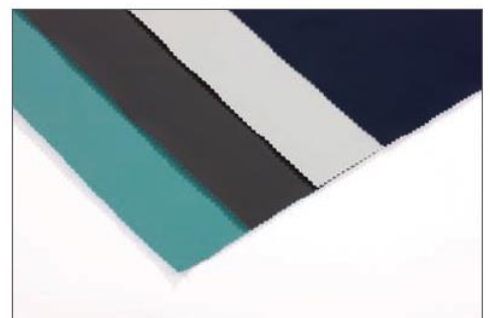

Standardfarben: weiss, dunkelblau
auf Anfrage: anthrazit, grün