

Monidrop® W – Das innovative Infusionskonzept

Der Monidrop® W ist die perfekte Erleichterung für Pflegekräfte bei der Überwachung von Infusionen.



Ermöglicht genaue Infusionsflüssigkeiten oder medikamentöse Therapie zu verabreichen und zu überwachen



Hilft den Pflegekräften bei der Verbesserung der Patientensicherheit



Zentrale Überwachung der Infusionen möglich - keine Kontrollgänge nötig



Kostensparend bei Verbrauchsmaterialien im Vergleich zu Infusionspumpen: ist kompatibel mit den gängigsten IV-Verwaltungssets




Sehr einfach zu bedienen und zu installieren



Folgende Informationen werden am Display und im zentralen IV-Screen angezeigt:

- Gesamtdauer der Infusion (hh:mm)
- Infusionsraten Display (ml/h)
- Gesamtvolumen (ml)
- Benachrichtigungen (Mit Licht und Ton):
 - Infusionsrate über 1200 ml/h
 - Niedrige Batterie
 - Optional: Infusion ist weniger als 6 ml
- Batterie Level
- WLAN Transfer

Das Gerät misst und zeigt die Infusions-/Tropfgeschwindigkeit an. Diese kann jedoch nicht über das Gerät gesteuert werden.

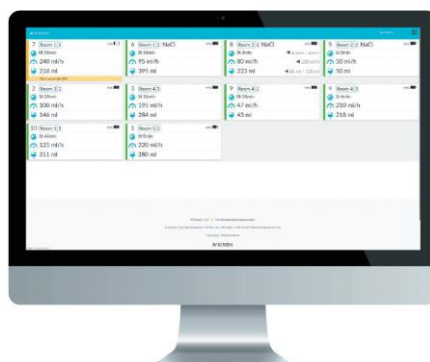

Technische Informationen

- Kompatibel mit den meisten Standard-IV-Sets
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Kann an die Fernüberwachung angeschlossen werden
- Funktioniert mit WLAN
- Anzeige möglichkeiten: Monitor Display, Smartphone, Tablet, PC/Laptop
- Lokale Installation am Krankenhausserver oder Cloud Lösung möglich
- Batteriebetrieb: Betriebsdauer über 40 Stunden
- Ladegerät im Verkaufspaket enthalten
- Abmessungen (BxHxL): 54x14 (42) x 166 mm
- Gewicht ~110g

